



1 Konfektionsgröße weniger!

40

39

38

37

36

35

34

slimMaxx
bodykavitation

slimMAXXpower | Anleitung

slimMAXX

bodykavitation

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem System arbeiten.



Inhalt

1. Sicherheitshinweise	1
2. Sicherheitshinweise	2
3. Prinzip der Laser-Kavitation-Liposuktion	4
4. Darstellung der Zubehörteile	7
5. Behandlungsschritte	9
6. Illustration des Einsatzes	17
7. Empfohlene Behandlungsperioden (nur als Anhaltspunkte)	24
8. Kontraindikation	25
9. Hinweise	26
10. Zubehörteile und technische Daten	27
11. Kundendienst	28
Mitteilung	28
Probleme außerhalb des Geltungsbereichs unserer Garantie	29

1. Sicherheitshinweise

- 1.1. Montieren Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Handlungen vor, die in unserer Anleitung nicht vorgesehen sind. Alle Reparaturen müssen von unseren zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.
- 1.2. Montieren oder betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät gelangt.
- 1.3. Ziehen Sie in den nachfolgend genannten Fällen den Netzstecker. Und setzen Sie sich mit der professionellen Wartungsstelle in Verbindung.
 - A. Das Gerät kommt mit Wasser in Berührung.
 - B. Das Gerät sondert einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch ab oder erzeugt ein lautes und markantes Geräusch.
 - C. Ein Kabel ist beschädigt.
 - D. Das Gerät ist heruntergefallen und wurde dabei beschädigt.
- 1.4. Stellen Sie nichts auf die Kabel und stellen Sie das Gerät so auf, dass niemand auf das Kabel treten kann.
- 1.5. Ziehen Sie nach Gebrauch sicherheitshalber den Netzstecker.
- 1.6. Stecken Sie nichts in die Buchse des Geräts, da dies einen Brand auslösen oder die Stromversorgung beeinträchtigen könnte. Holen Sie Gegenstände, die gegebenenfalls in das Innere des Gerätes gelangt sind, nicht selber heraus, sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Verkäufer oder an den Hersteller.
- 1.7. Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, so dass es nicht umkippen und beschädigt werden kann.
- 1.8. Unser Unternehmen ist berechtigt, die in dieser Einführung enthaltenen Informationen ohne Ankündigung zu ändern! Und die Erläuterungen regelmäßig anzupassen.

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die nachfolgenden Hinweise.



- 2.1. Es ist unbedingt erforderlich, das je nach Anforderung der jeweiligen Behandlung entsprechend einzustellen.
- 2.2. Die Behandlung mit der Maschine darf niemals Schmerzen oder Hautrötungen hervorrufen oder Flecken hinterlassen.
- 2.3. Bewegen Sie die Behandlungsköpfe langsam über die Körper- oder Gesichtshaut, ohne sie über einer Hautstelle stehen zu lassen.
- 2.4. Behandeln Sie mit dem Gerät keine Kinder unter 7 Jahren. Vor einer Behandlung von Kindern über 7 Jahren ist eine ärztliche Beratung einzuholen.
- 2.5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Fieber, einer Entzündung, Dermatitis (Akne, Ekzem, Herpes), Warzen, offenen oder kürzlich genähten Wunden, schwerwiegenden und fortschreitenden Erkrankungen (Krebs, AIDS, Hepatitis, Blutkrankheiten usw.) oder Blutgerinnungsproblemen leiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter einer Phlebitis leiden oder litten, sich innerhalb der vergangenen zwei Monate einer Venenoperation unterzogen haben, Krampfadern haben oder ein Kribbeln in Ihren Gliedern verspüren. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie unsicher sind.
- 2.6. Mit dem Gerät dürfen nicht Schwangere behandelt werden.
- 2.7. Die Maschine kann auf allen gesunden Körperoberflächen eingesetzt werden, mit Ausnahme der Augen, der Kehle, der Ohren, der Stimmritze und des Genitalbereichs.
- 2.8. Ohne ärztlichen Rat darf das Gerät weder innerhalb des Mundes noch auf Schleimhäuten, Brustwarzen oder Muttermalen eingesetzt werden.

- 2.9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Epilepsie leiden. Das Gerät darf nicht von Personen genutzt werden, die an einer Geisteskrankheit leiden.
- 2.10. Bei einer längeren Behandlung mit Medikamenten wie Entzündungs- oder Blutgerinnungshemmern oder Antibiotika sollten Sie vor Verwendung des Geräts einen Arzt konsultieren. Gleiches gilt, wenn sich auf Ihrer Haut bereits bei leichtesten Stößen Hämatome bilden.
- 2.11. Behandeln Sie mit dem Gerät auf keinen Fall Körperteile, an denen Sie Schmuck oder Ringe tragen.
- 2.12. Das Wohlbefinden verbessert sich durch die regelmäßige Nutzung der Maschine; es empfiehlt sich daher, eine begonnene Behandlung über längere Zeit fortzusetzen. Wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Nutzungsempfehlungen nicht befolgen, erzielen Sie eventuell nicht den optimalen Behandlungserfolg. Verwenden Sie das Gerät nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus.
- 2.13. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn sich Ihre Symptome nicht bessern oder irgendwelche Zweifel bezüglich der Nutzung bestehen.
- 2.14. Die Wirkung kann in Abhängigkeit vom Alter oder den Lebensgewohnheiten (körperliche Aktivität, Ernährung usw.) unterschiedlich sein.
- 2.15. Nach einer plastischen Operation darf die Maschine nur gemäß den Anweisungen des Chirurgen genutzt werden.
- 2.16. Die Maschine dient nur der gewerbsmäßigen Nutzung; die private Nutzung des Geräts ist untersagt.
- 2.17. Die Maschine darf nicht länger als zwei Stunden ohne Unterbrechung betrieben werden. Am besten ist es, die Maschine nach einer Betriebsdauer von einer Stunde für 10-15 Minuten vom Netz zu nehmen.

3. Prinzip der Laser-Kavitation-Liposuktion

Die Laser-Kavitation-Liposuktion verbindet die modernsten Techniken zur Behandlung der wesentlichen Ursachen für Cellulite und Fettpolster.

Körperregionen: Der ganze Körper

Bereich: Remodellierung

Technologie: Ultraschall, Kavitation, Vakuum, Quadrupol-HF Laser

Behandlung: Adipositas
Allgemeine Adipositas
Cellulite
Muskelkontrakturen

Am Körper:
Dehnungsstreifen und Narben

Im Gesicht:
Schlaffheit

Körperkonturierung:
Wassereinlagerungen / müde Beine / Entwässerung

So funktioniert's:

Die Laser-Kavitation-Liposuktion nutzt Ultraschall, Kavitation und Quadrupol-HF-Laser, um Orangenhaut zu straffen und die Körperkontur zu verbessern.

Mit der **Laserstrahlung** wird ein natürlicher Prozess des Körpers eingeleitet, die immer dann abläuft, wenn der Körper auf gespeicherte Energiereserven zurückgreifen muss. Die Laser-Lipolyse löst daher weder unnatürliche Reaktionen im Körper aus, noch schädigt sie das umliegende Gewebe wie Haut, Blutgefäße oder periphere Nerven. Sportliche Tätigkeit nach der Behandlung begünstigt den Stoffwechsel und damit die vollständige Reinigung des Körpers von den freigesetzten Fettsäuren.

Ultraschallwellen versetzen das Gewebe in Schwingungen, die die Cellulite aufspalten, die Zirkulation verbessern sowie Entzündungen hemmen und die Regeneration fördern.

Durch die Anregung schneller Schwingungen in der tieferen Hautstruktur entsteht **Kavitation** in Form zahlreicher Vakuumblasen, die die Fettzellen zum Implodieren bringen. Dadurch werden die Fettmoleküle aufgespalten und die Fettsäuren freigesetzt.

Die **Vakuumbehandlung** bewirkt eine spürbare Mobilisierung lokaler Einlagerungen und wirkt außerdem entwässernd.

Die **Quadrupol-HF-Strahlung** ist eine firmeneigene Technologie zur Erzeugung eines hocheffizienten, dichten Energierasters. Dieses dichte Energieraster durchdringt mehrere Hautschichten und erwärmt die Haut von innen nach außen. Die vollständige Durchdringung der Haut hat die klinische Wirksamkeit des Verfahrens sprunghaft erhöht mit klar erkennbaren Resultaten der Figur leisten.

Fazit:

Das slimMAXX - Verfahren besteht aus einer Reihe von hochmodernen modernen Techniken, die sich für die Behandlung von Cellulite und lokalen Fettablagerungen als wirksam erwiesen haben und damit einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Figur leisten.

Es ist ein nicht invasives, schmerzloses und sicheres Verfahren, das in erheblich kürzerer Zeit zu nachweisbaren Resultaten führt.

Mehrfachfunktion:

slimMAXX vereint die effektivsten Techniken zur Körperbehandlung, die den slimMAXXpower zum besten Gerät in Europa machen.

Kundenspezifische Anpassung auf Anfrage:

- Dank der Vielzahl möglicher Programme. Der slimMAXXpower hat bis zu 6 Programme, die unterschiedliche Techniken kombinieren, um optimale Ergebnisse zu erhalten, sowie für jede Technik mehrere voreingestellte Programme.
- Spezielle Anwendungen für jeden Fall. Mehrfach patentierte Applikatoren mit verschiedenen Größen für alle Bereiche, die behandelt werden sollen, einschließlich des Gesichts.

Maximale Rendite:

- Der gleichzeitige Einsatz verschiedener Techniken führt zu besseren Ergebnissen in kürzerer Zeit.
- Die Verwendung von Platten ermöglicht Kunden, sich ohne Anwesenheit einer Hilfskraft selber zu behandeln
- Niedrige Kosten für den Konsumenten.

Schmerzfreie und sichere Behandlung:

Der Sog wird auf Basis eines Vakuum-Tests individuell angepasst, um Schmerzen und Nebeneffekte wie Quetschungen oder eventuelle Abschlaffung zu vermeiden.

4. DARSTELLUNG der ZUBEHÖRTEILE

4.1. 80K & 40K Ultraschall-Kavitationssystem

Durch die starke Ultraschalleinstrahlung direkt in die Fettschicht entsteht Kavitation in Form zahlreicher Vakuumbblasen, die die Fettzellen zum Implodieren bringen. Dadurch werden die Fettmoleküle aufgespalten und die Fettsäuren freigesetzt.



40kHz Kavitation

4.2. Quadrupol-HF

Der vierpolige HF-Applikator erwärmt durch Hochfrequenzstrahlung und magnetische Impulse die Haut gleichmäßig im gesamten Behandlungsbereich. Die gleichförmige Wärmeverteilung verringert den Energiebedarf, erhöht die Sicherheit und macht den örtlichen Einsatz von Kühlmitteln überflüssig.



4.4. HF Vakuum LPG

Das Rollen-Lipomassagesystem basiert auf einer neuen automatisierten Rollentechnologie und Vakuum, mit der verschiedene Teile des gesamten Körpers bequemer und sanfter berührt, gerubbelt und massiert werden können. Durch Kombination mit der einzigartigen zweipoligen HF-Strahlung zum Schmelzen von Fett, Lymphdrainage und weiteren Funktionen lassen sich tiefere Hautschichten behandeln. So können die Ergebnisse eines vollständigen Behandlungsspektrum erzielt und Fett abgebaut werden.



4.5. Laser

Das Laser-Lipolysesystem leitet niedrigerenergetische Laserstrahlung in die Fettzellen und regt dort die Aufspaltung eingelagerter Triglyceride in freie Fettsäuren und Glycerin an. Über Kanäle in den Zellmembranen entweichen diese Reaktionsprodukte aus der Fettzelle, werden im Körper in anderen Gewebe transportiert und dort während des Stoffwechsels zur Energieerzeugung genutzt.




5. Behandlungsschritte

- 1) Reinigen beziehungsweise desinfizieren Sie die Zubehöerteile und prüfen Sie, ob sie korrekt angeschlossen sind.
- 2) Reinigen Sie die Haut an der Behandlungsstelle und bringen Sie die Produkte auf – bitte verwenden Sie Ultraschall-Fettverbrennungsgel.
- 3) Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Hauptschalter am Bedienpult ein.
- 4) Stellen Sie in Abhängigkeit vom Zustand der Fetteinlagerung des Kunden die Intensität, die Impulsform und die Betriebsdauer ein.
- 5) Halten Sie nach der Behandlung an und schalten Sie den Hauptschalter aus. Reinigen Sie die Ersatzteile und platzieren Sie sie im Original.

Systemstart


Klicken Sie auf „Enter“.

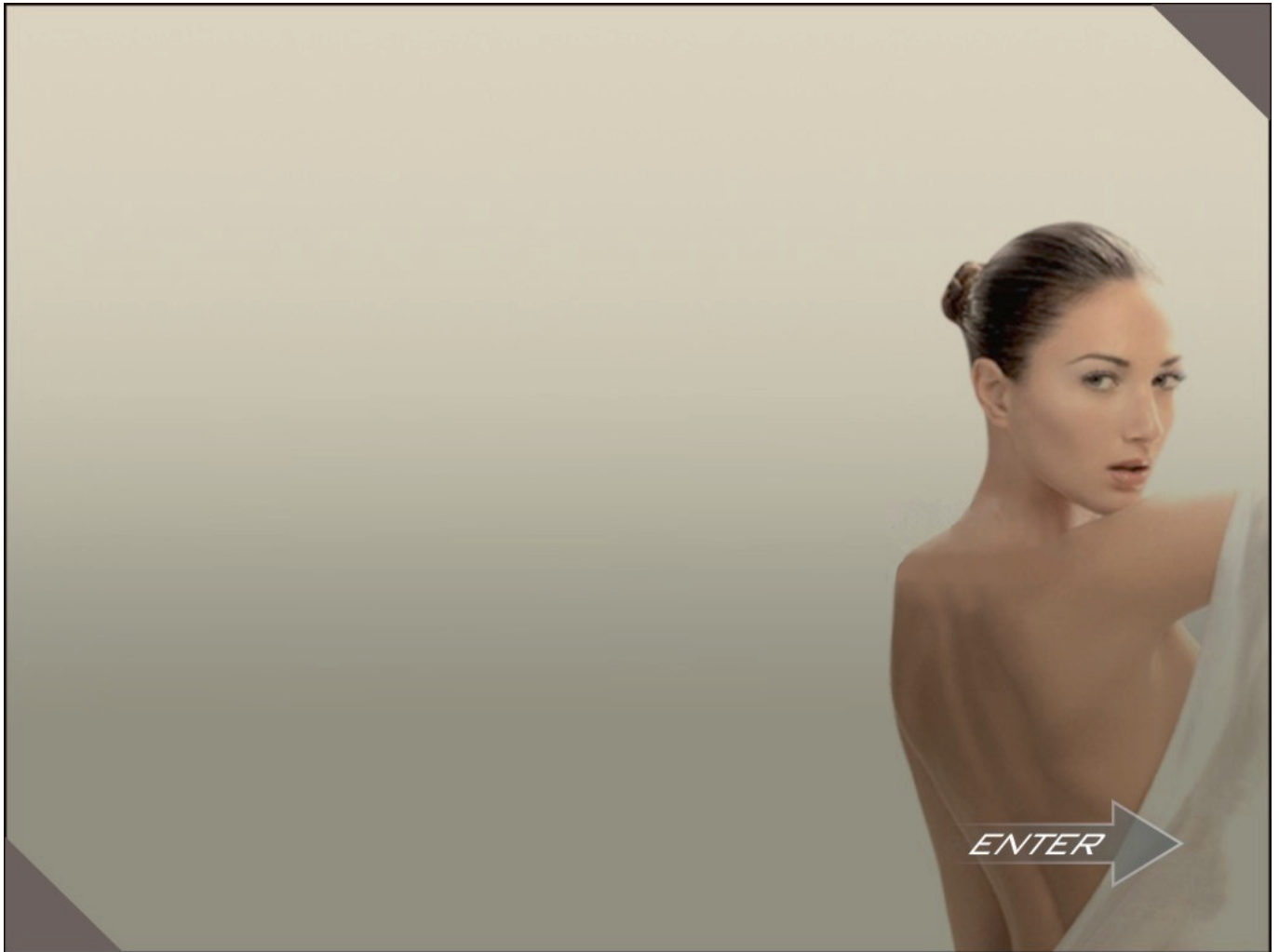

Systemstart

Hinweis: Wenn Sie 80 kHz und 40 kHz verwenden, müssen Sie die Frequenz anpassen. Da jeder Kopf eine andere Frequenz hat, muss diese bestmöglich auf die Behandlungsfrequenz abgestimmt werden.

Klicken Sie den auf dem Bildschirm abgebildeten Knopf an.

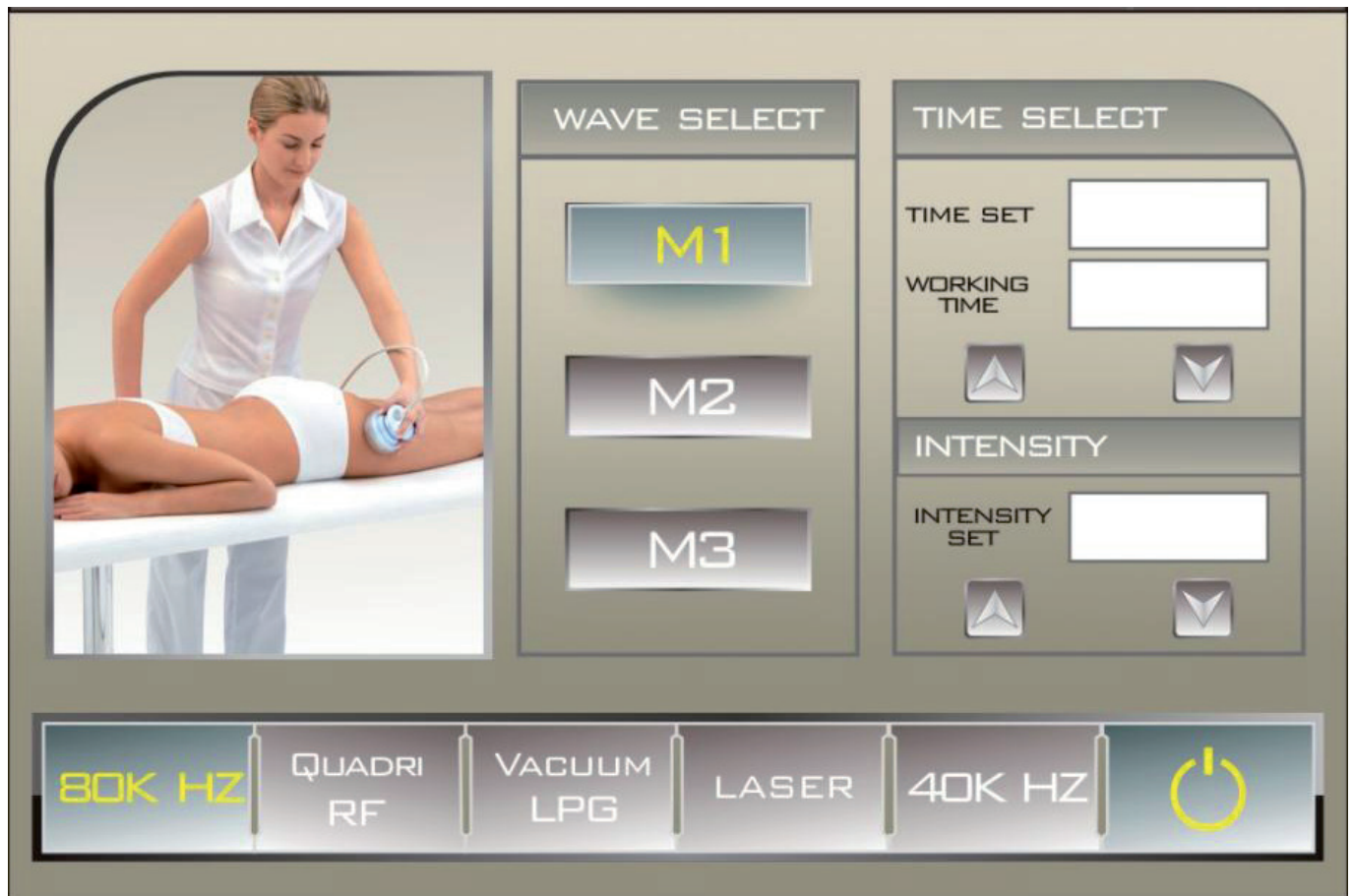


(80 kHz Screenshot), (40 kHz Screenshot) und Sie gelangen zum Einstellungsmenü.


Adjust Frequency


K HZ




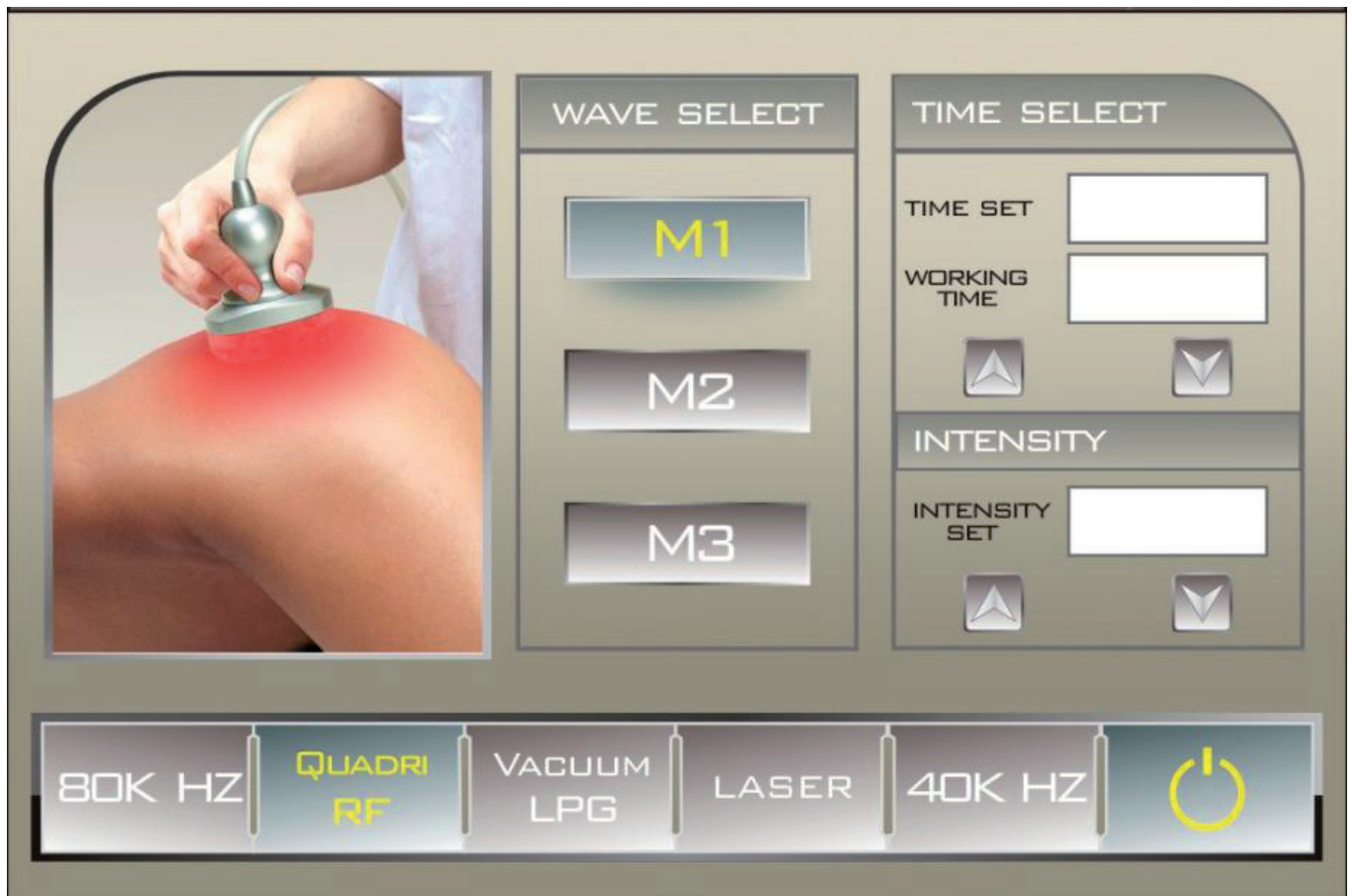

Stellen Sie die F-Energie ein.

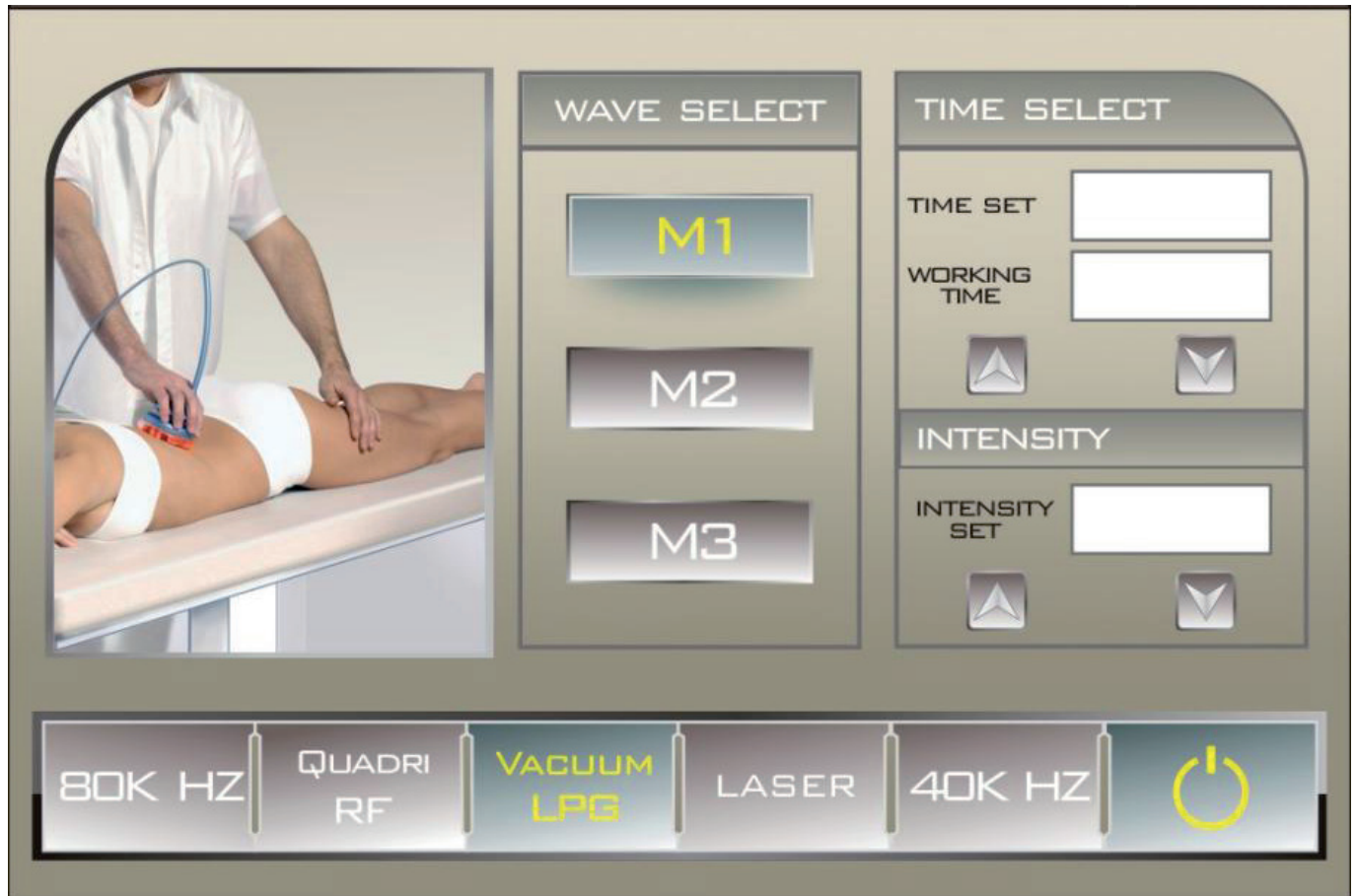

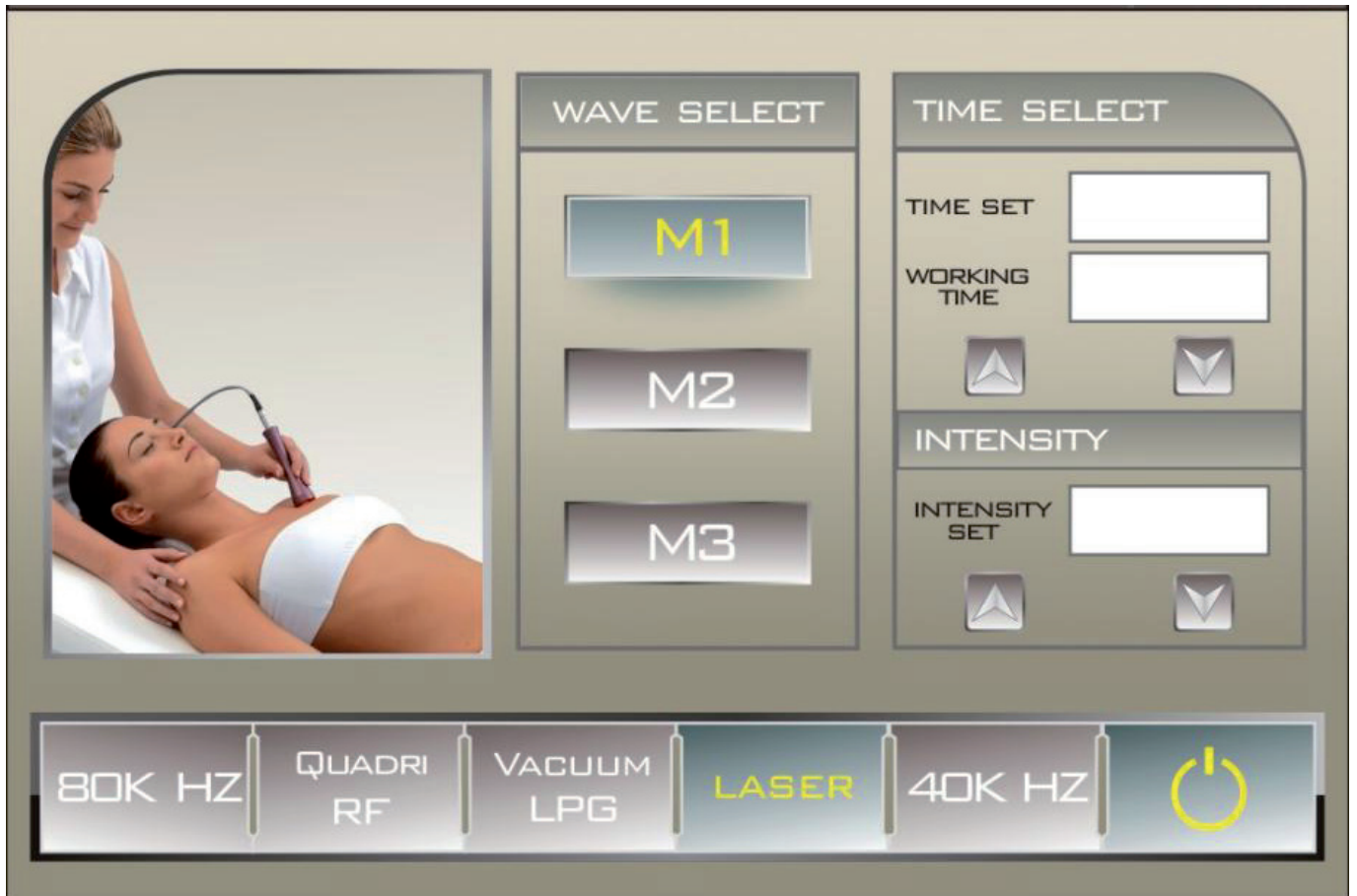

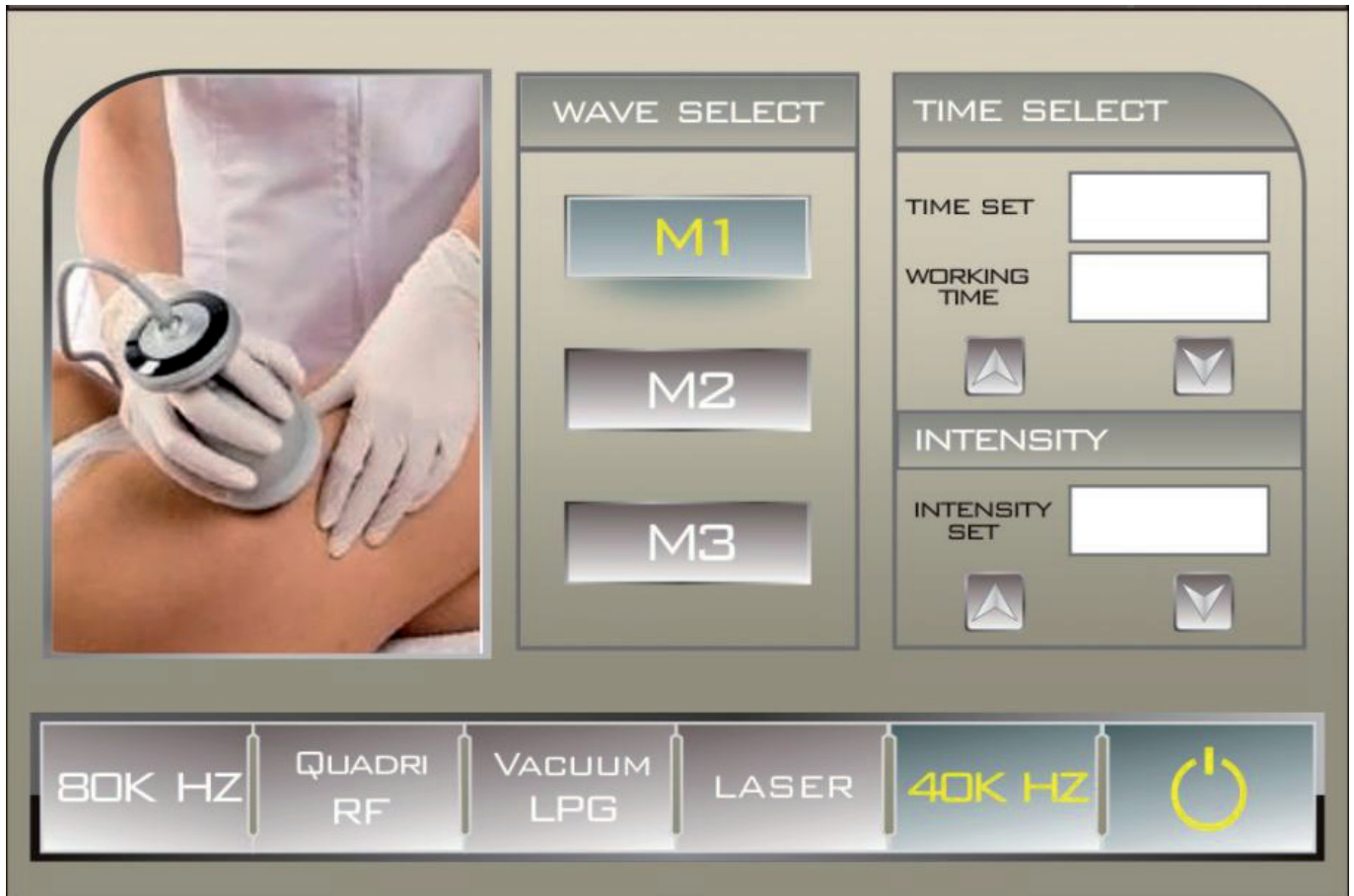

Wellenlänge auswählen:

- M1: Pulswelle, geeignet für Arme, Oberschenkel und andere Körperteile oder für schwach ausgebildete Fettpolster.
- M2: Dreieckswelle, geeignet für Hüfte, Unterleib & Rücken oder für mäßig ausgebildete Fettpolster.
- M3: Dreieckswelle, geeignet für Hüfte, Unterleib & Rücken oder für mäßig ausgebildete Fettpolster.



Einstellen der Betriebsdauer, von 1 bis 30.



Einstellen der Intensität, von 5 bis 100.

6. ILLUSTRATION des EINSATZES


OBERSCHENKEL (Behandlungsdauer: 30 Minuten):

1. Von unten nach oben, auf die Leistenbeuge drücken um die Lymphgefäße zu entleeren




2. Drücken bei kreisender Bewegung zur Auflösung des Fetts


3. Drücken bei kreisender Bewegung gegen den Urzeigersinn fördert die Auflösung von Fettpolstern.

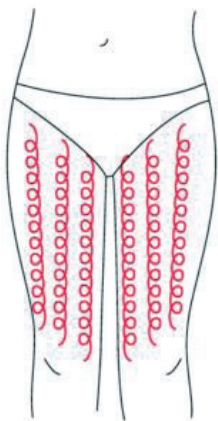

4. Drücken unter Hin- und Her-Bewegung zur Auflösung von Fettpolstern

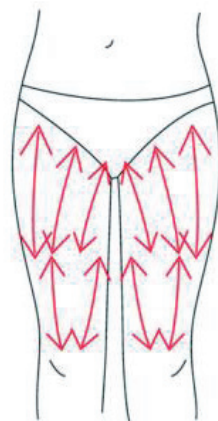

5. Ziehen des Muskelgewebes vom Knie aus nach oben kann die Rundung verbessern.

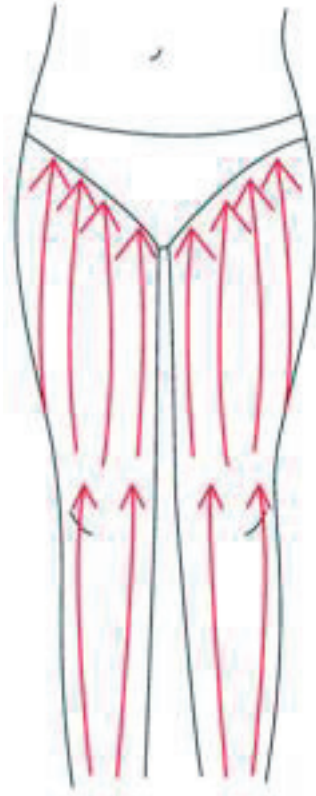


GESÄSSMUSKELN (Behandlungsdauer: 20-30 Minuten)


1. Von oben nach unten, unter Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn, Ziehen von links nach rechts.




2. Entlang den Lymphgefäßen zur Taille ziehen.

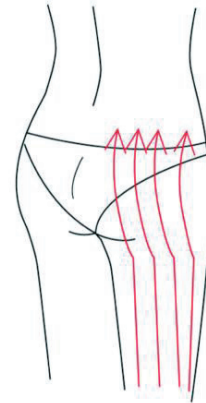


3. Entlang dem Muskel nach oben ziehen, um den Muskel zu liften und zu straffen.

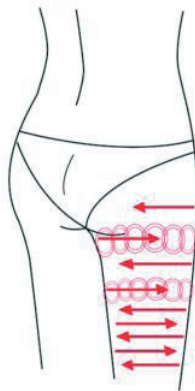

4. Auf dem Rücken können kreisende Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn die Auflösung von Fettpolstern fördern

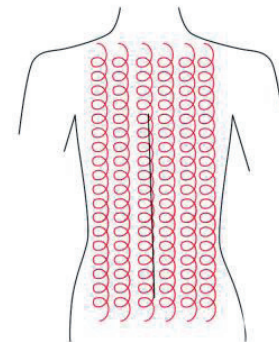

5. Manuelle Lymphdrainage zum Transport der Giftstoffe zu den Lymphknoten verbessert die Rundungen des Rückens.

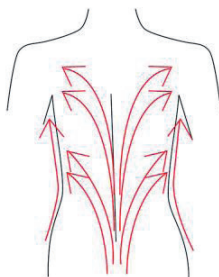


ARM (Behandlungsdauer: 30 Minuten)

1. Von oben nach unten



2. Vom inneren Ellenbogen zur Achselhöhle zur manuellen Lymphdrainage.
Vom Ellenbogen nach außen zur Straffung.


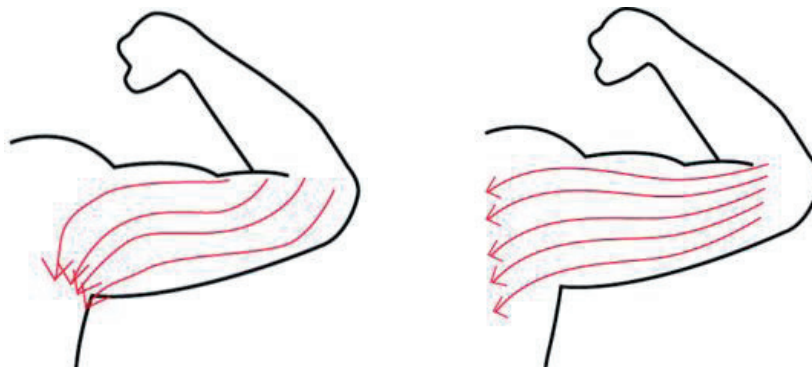



3. Kreisbewegung zur Stimulierung des Lymphknotens. Bewegung gegen den Uhrzeigersinn oder Hin- und Herbewegung zur Auflösung von Fettpolstern.




UNTERLEIB (Behandlungsdauer: 20-30 Minuten)

1. Vom Bauchfell- und Muskelgewebe zur Leiste ziehen.

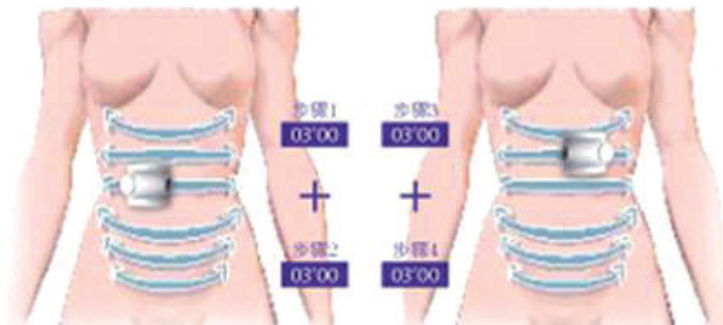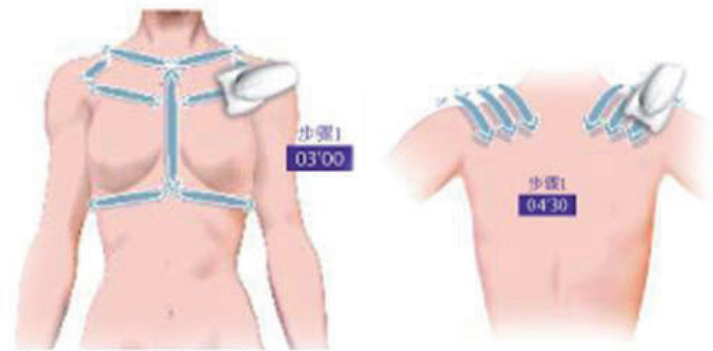


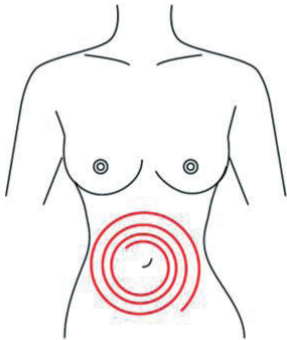


2. Größer werdende Kreisbewegung gegen den Uhrzeigersinn rund um den Nabel unterstützt die Dickdarm-Peristaltik.

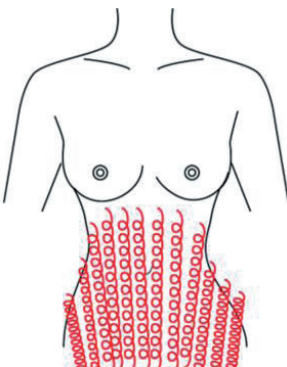

3. Drücken mit Kreisbewegung gegen den Uhrzeigersinn.

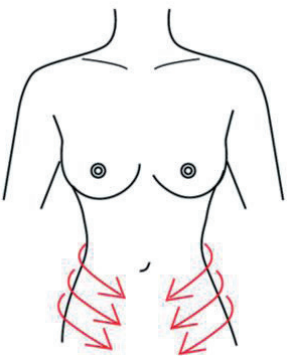

4. Vom Bauchfell- und Muskelgewebe zur Leiste ziehen.

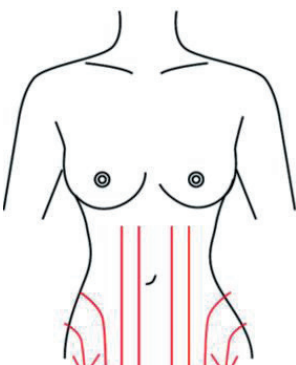

5. Giftstoffe durch manuelle Lymphdrainage zur Leistengegend befördern.

BEIN (Behandlungsdauer: 15-20 Minuten)

1. Von oben nach unten, drücken



7. Empfohlene Behandlungsperioden (nur als Anhaltspunkte)

PROGRAMM	BEHANDLUNGSPERIODE	ANZAHL PRO WOCHE
Verschlankeung und Entgiftung des Gesichts	10 mal/Perioden	1-2 Sitzungen
Verschlankeung und Formung des Körpers	20 mal/Perioden	1-2 Sitzungen
Körperentgiftung	20 mal/Perioden	1-2 Sitzungen
Straffung und Formung einzelner Bereiche der Haut	20 mal/Perioden	2-3 Sitzungen

8. Kontraindikation

- 1) Schwangerschaft oder Menstruation
- 2) Epilepsie
- 3) Patienten mit Malignomen
- 4) Patienten mit nicht verheilten Operationswunden
- 5) Patienten mit akuten Entzündungen oder Epidemien
- 6) Patienten mit Herzkrankheiten oder Herzschrittmacher
- 7) Patienten mit Nieren- (Gallen-) Steinen
- 8) Patienten mit Metall- oder Kieselgelimplantaten
- 9) In Phasen der Menstruation, der Empfängnisverhütung, der Inkontinenz oder bei Einwilligung in eine Unterleibsoperation
- 10) Bei sich innerlich schnell aufheizendem Körper
- 11) Bei genetisch bedingter Überempfindlichkeit.

9. Hinweise

- 1) Verwenden Sie stets spezielles Ultraschall-Gel.
- 2) Vermeiden Sie Schläge auf den Ultraschallkopf.
- 3) Bringen Sie vor der Behandlung genug Ultraschall-Gel auf, um eine Überhitzung des Kopfes zu vermeiden.
- 4) Bleiben Sie nicht an einer Stelle stehen und führen sie den Kopf nicht über Knochen.
- 5) Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel zur Desinfektion des Ultraschallkopfes. Wir empfehlen ein nasses Baumwolltuch oder ein trockenes Handtuch.
- 6) Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- 7) Wenn die Maschine längere Zeit nicht genutzt wird, schalten Sie sie bitte aus und nehmen Sie sie vom Netz.
- 8) Vor der Behandlung müssen der Behandelnde und der Patient alle metallenen Schmuckgegenstände ablegen.
- 9) Nach einer Betriebszeit von einer Stunde ist die Maschine für 10 Minuten anzuhalten, bevor sie wieder benutzt werden kann.
- 10) Achten Sie darauf, dass Sie während des Betriebs keine weitere Behandlung annehmen.

10. Zubehöerteile und technische Daten

■ TECHNISCHE DATEN

Frequenz des 80-kHz-Ultraschallkopfes	80 kHz
Frequenz des 40-kHz-Ultraschallkopfes	40 kHz
Frequenz des Vierpol-HF	1 MHz
Frequenz des Vakuum-LPG	1 MHz
Intensitätsbereich des HF	1 J-20 J
Leistung	500 W
Spannung	110V/220V Wechselspannung
Arbeitstemperatur	10°~35°
Gewicht	40 kg
Abmessungen	60x50x120 cm

■ ZUBEHÖR

Bezeichnung	Menge
80 kHz-Ultraschallkopf	1 Stück
40 kHz-Ultraschallkopf	1 Stück
Quadrupol-HF-Kopf	1 Stück
Vakuum LPG-Kopf	1 Stück
Laser-Kopf	1 Stück
Halter	2 Stück
Sicherung	2 Stück
Netzkabel	1 Stück
Handbuch	1 Buch

11. Kundendienst

Mitteilung

Die Garantiefrist beträgt 1 Jahr für das Gerät und 3 Monate für die Zubehörteile und beginnt mit dem auf der Rechnung angegebenen Kaufdatum. (Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.) Die Wartung und Erneuerung von Geräten und Zubehörteile, für die keine Garantie übernommen wird oder deren Garantiefrist abgelaufen ist, übernehmen wir gegen Gebühr. Bezüglich des Erwerbs von Komponenten und Verschleißteilen wenden Sie sich an Ihren Verkäufer. Wir garantieren für die Qualität Ihres Geräts. Normalerweise gibt es keine Qualitätsprobleme.

1. Wenn ein Mangel vorliegt, teilen Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon die Gründe mit. Die Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon ist am besten, weil einige der Probleme auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind.
2. Wir empfehlen dem Kunden, bei Auftreten eines Problems vom betroffenen Bereich Fotos aufzunehmen, die wir an unseren Techniker weiterleiten. Innerhalb von 1-7 Werktagen werden Sie von unserem Techniker eine zufriedenstellende Antwort erhalten
3. Wenn ein von der Garantie gedecktes Ersatzteil Ursache des Problems ist, sind wir bereit, das Ersatzteil auszutauschen und das neue Ersatzteil unserem Kunden zusammen mit seiner nächsten Bestellung zuzusenden. Wenn der Zeitpunkt der nächsten Bestellung noch nicht feststeht, trägt der Kunde die Frachtkosten.

Probleme außerhalb des Geltungsbereichs unserer Garantie

- Eigenständiges Zerlegen der Maschine
- Fahrlässiges Fallenlassen
- Mangelnde Obhut, unzureichender Schutz
- Betrieb unter Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch
- Verschleiß.

Etwaige Änderungen der Ausführung und Spezifikation der Maschine erfolgen ohne zusätzliche Ankündigung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das lokale Vermarktungsunternehmen.

slimMAXX

bodykavitation

slimMAXX Cavitation GmbH
Am Zollhafen 24
50678 Köln

Telefon: 01805 501 4 504 *
24 Stunden - Hotline: 0800 33 66 44 43 (gebührenfrei)
Fax: 01805 501 301 7 *

www.slimMAXX.de
slim@slimMAXX.de

* 14 Cent / Min. aus dem dt. Festnetz, mobil max. 60 Cent / Min.